

## Instructiuni de folosire

### Rolator AT51113



Walker AT51113 este fabricat din aluminiu durabil, de înaltă calitate. Cadrul pliabil este un confort pentru transport. Walkerul este echipat cu roți față pivotante și roți spate nepivotante cu frână și clemă de parcare. Produsul este îmbogățit cu un șezut și un spătar, ceea ce vă permite să vă odihniți în poziție șezând. Premergătorul are și o geantă convenabilă pentru lucrurile necesare sau mici achiziții.

### Avertizări

Înainte de a începe orice operațiune, verificați starea dispozitivului. Dacă produsul funcționează sau arată anormal, vă rugăm să contactați imediat dealerul de la care ați achiziționat produsul. Antar Sp. Javna nu este responsabil pentru utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului.

#### Compoziția produsului:

cadru	Plastic
aluminiu	captuseala cotiera
colică	poliuretan
PVC scaun	
mănerenailon și poliester	

### Pregătirea pentru utilizare

Selectarea tipului de dispozitiv de asistență și configurația corespunzătoare a acestuia trebuie făcută de personal medical și tehnic calificat, în funcție de condițiile și condițiile de utilizare a dispozitivului de către utilizator.

1. Desfaceți cadrul coborând tuburile transversale ale scaunului.
2. Reglați înălțimea mânerelor și a cotierelor.
3. Puneți sapa.
4. Atașați cureaua centrală (fig. 1) pentru a preveni plierea accidentală a premergătorului, asigurați-vă că cureaua este întinsă.



### Utilizarea frânelor

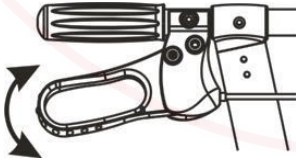


Fig. 1

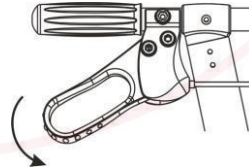


Fig. 2

1. Trageți maneta de frână pentru a încetini sau a opri premergătorul. Eliberați maneta de frână pentru a începe din nou mișcarea (fig. 1).
2. Pentru a activa frâna de parcare, împingeți maneta frânei în jos până se blochează (fig. 2).

greutatea utilizatorului	136 kg
lățimea totală	61,5 cm
latimea între manere	50 cm
adâncimea totală	70 cm
latimea scaunului	46 cm
adâncimea scaunului	25 cm
înălțimea scaunului	54 cm
intervalul de reglare a înălțimii mânerelor	108,5 - 121 cm
colică	8"
cântare	8,4 kg



ACEST MARC INSEAMNA GREUTATEA MAXIMA A UTILIZATORULUI

### Depozitarea și eliminarea

Țineți premergătorul departe de surse de lumină, temperaturi ridicate și umiditate. Evitați expunerea premergătorului la lumina directă a soarelui. Aruncați premergătorul în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția mediului și reciclarea.

### Precauții generale de utilizare

Înainte de utilizare, asigurați-vă întotdeauna că mânerele sunt la înălțimea corectă și că sunt bine fixate. Pentru a evita riscul de cădere, premergătorul nu trebuie utilizat pe suprafețe denivelate sau în pantă.

Verificați starea roților și a frânelor. În cele din urmă, verificați stabilitatea generală a cadrului. **Întreținere și curățare**

După fiecare utilizare, îndepărtați murdăria acumulată cu detergenți blânde, apoi lăsați să se usuce. Nu folosiți bureți ascuțiți, care se freacă. Verificați periodic funcționarea frânelor, starea etanșărilor elementelor de prindere și starea sudurilor.

**PRUDENȚĂ:** La utilizarea și manipularea scaunului cu roțile, precum și la plierea acestuia și reglarea mecanismelor, poate exista riscul de blocare și/sau ciupire a părților corpului utilizatorului/însoțitorului în deschiderile/golurile dintre componente.

Acești pași ar trebui să fie efectuați cu precauție extremă.

După finalizarea ajustării, stabiliți poziția strângând cu atenție piulițele / șuruburile.

### PRUDENȚĂ:

În caz de durere, reacții alergice sau alte simptome tulburătoare, neclare pentru utilizator legate de utilizarea unui dispozitiv medical, consultați un medic. **PRUDENȚĂ:**

Când are loc un „incident grav” legat de produs, care a condus direct sau indirect sau ar putea duce la oricare dintre următoarele evenimente:

- a) decesul unei stări de sănătate a unui pacient, utilizator sau alte persoane sau
- b) deteriorarea temporară sau permanentă a sănătății unui pacient, utilizator sau alte persoane sau
- c) o amenințare gravă la adresa sănătății publice

„incidentul grav” de mai sus trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care își are reședința utilizatorul sau pacientul. În cazul Poloniei, autoritatea competentă este Oficiul pentru înregistrarea produselor medicamentoase, a dispozitivelor medicale și a produselor biocede.

**PRUDENȚĂ:** Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune cauzate de neglijarea întreținerii, service inadecvat sau nerespectarea recomandărilor cuprinse în acest manual.

**PRUDENȚĂ:** este interzisă utilizarea produsului altfel decât în conformitate cu scopul pentru care a fost destinat! **PRUDENȚĂ:** Poate exista riscul de a se răsturna dacă produsul este utilizat greșit eu insumi. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de încărcare/descărcare/mutare. După finalizarea ajustării,

stabiliți poziția strângând cu atenție piulițele / șuruburile.

**PRUDENȚĂ:** La utilizarea și manipularea produsului, precum și la asamblarea și reglarea mecanismelor, poate exista riscul de prindere și/sau ciupire a părților corpului utilizatorului/însoțitorului în deschiderile/golurile dintre elemente. Acești pași ar trebui să fie efectuați cu precauție extremă. După finalizarea ajustării, stabiliți poziția strângând cu atenție piulițele / șuruburile.