



**INSTRUCTIUNI DE
FOLOSIRE CADRU DE MERS
ULTRAUSOR CU SPRIJIN PE
COATE**

AT51114



ATENȚIE: Inspectați toate piesele pentru eventuale daune de transport. Dacă observați o astfel de deteriorare, NU utilizați produsul. Mai multe informații de la producător.

RECOMANDĂRI SIGURANȚĂ

Pentru a fi în siguranță în timp ce utilizați amvonul, **TREBUIE** să urmați instrucțiunile de mai jos.

AVERTISMENT GENERAL

NU asamblați și utilizați produsul înainte de a citi și înțelege acest manual. Dacă nu înțelegeți niciun avertisment, sau instrucțiuni, contactați medicul dumneavoastră, vânzătorul cu amănuntul sau reprezentantul de service înainte de a încerca să asamblați produsul pentru a evita rănirea sau deteriorarea produsului. Fiecare utilizator ar trebui să-și ceară medicului sau terapeutului să determine varianta de ajustare adecvată și metoda de utilizare.

Produsul nu este destinat utilizării în poziție șezând.

Un medic/terapeut ar trebui să fie prezent la reglarea înălțimii pentru a se asigura că utilizatorul este susținut și că șuruburile sunt poziționate și strânse corect.

Când produsul este montat, asigurați-vă întotdeauna că butoanele pentru reglarea mânerelor sunt blocate și butoanele metalice sunt în locurile potrivite. Nerespectarea instrucțiunilor de mai sus poate duce la vătămări. Înainte de utilizare, verificați dacă **TOATE** reglajele au fost asigurate și dacă roțile și părțile mobile ale produsului sunt în stare bună.

În timpul utilizării, roțile trebuie să fie **ÎNTOTDEAUNA** în contact cu solul pentru a asigura o stabilitate adecvată.

Când cadrul este utilizat într-o poziție staționară, frânele sale **TREBUIE** să fie în poziția de blocare.

Nerespectarea recomandărilor de mai sus poate duce la răsturnarea și rănirea utilizatorului.

ATENȚIE:

În cazul unui „incident grav” legat de produs, care a dus direct sau indirect la, poate fi dus la sau poate duce la oricare dintre următoarele:

- a) decesul unui pacient, utilizator sau alte persoane sau
- b) deteriorarea temporară sau permanentă a sănătății pacientului, utilizatorului sau altei persoane sau
- c) amenințare gravă la adresa sănătății publice

acest „incident grav” ar trebui raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care locuieste utilizatorul sau pacientul. În cazul Poloniei, autoritatea competentă este Oficiul pentru înregistrarea produselor medicamentoase, a dispozitivelor medicale și a produselor biocide.

ATENȚIE: În caz de durere, reacții alergice sau alte simptome tulburătoare, neclare pentru utilizator legate de utilizarea dispozitivului medical, consultați un medic.

ATENȚIE: În timpul utilizării și manipulării produsului, precum și în timpul montajului și reglării mecanismelor acestuia, poate exista riscul de prindere și/sau prindere a unor părți din corpul utilizatorului/insotitorului în deschideri/goluri dintre elemente. Acești pași trebuie efectuați cu o grijă deosebită. După reglare, stabiliți poziția strângând cu atenție piulițele/șuruburile.

ATENȚIE: Poate exista riscul de răsturnare dacă produsul este utilizat incorect. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de montare/demontare/deplasare.

ATENȚIE: Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de întreținerea neglijată, de service necorespunzător sau rezultate din nerespectarea recomandărilor cuprinse în acest manual.

ATENȚIE: este interzisă utilizarea produsului în alt mod decât în scopul pentru care a fost destinat!

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ INSTALARE

Verificați întotdeauna ca toate componentele să fie bine blocate înainte de utilizare.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ: înainte de utilizare, consultați medicul dumneavoastră cu privire la utilizarea corectă a produsului. Utilizatorul trebuie să se deplaseze în așa fel încât cadrul să nu se îndepărteze prea mult de el, altfel se poate răsturna. Nu depășiți sarcina maximă de 136 kg. Acționați întotdeauna frânele când cadrul este în repaus.


AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ MONTAJ SI MONTARE

După asamblarea cadrului, asigurați-vă că ambele mâneri sunt la aceeași distanță și nu se mișcă.

Demontare/pregătire pentru utilizare:

1. Așezați baza cadrului pe roți, apoi puneți-l pe cadrul principal (placa de susținere), ajustând toate cele patru îmbinări în același timp și apăsați astfel încât toate cele patru încuietori de blocare să fie presate în poziție. (fig. 1 și 2)
2. Așezați piesa de montare pe placa suport în orificiul corespunzător (atașați-o apăsând-o în încuietoria de blocare) și apoi suportul. Suportul trebuie strâns cu cheia furnizată. (fig. 3 și 4)
3. Placa suport poate fi reglată (11 niveluri de reglare) prin plasarea încuietorilor de blocare la înălțimea corespunzătoare.
4. Așezați mânerul în orificiile speciale de sub suport, slăbiți butonul și setați lungimea corespunzătoare, strângeți butonul din partea de jos. (fig. 5 și 6)

5. Pentru a asigura stabilitatea cadrului în poziția de repaus se folosesc frâne de picior, care se acționează prin apăsarea pârghiei de presiune a roților din spate, ceea ce determină efectul de frânare din cauza blocării acestor roți de la mișcare.

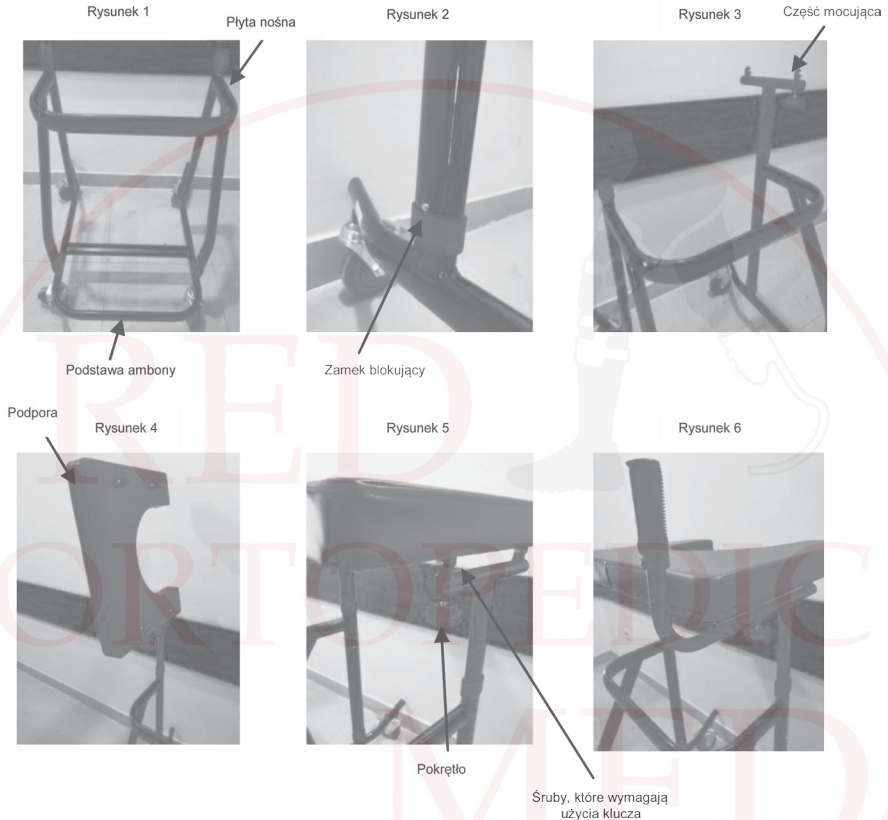

Piere:Efectuați toți pașii descriși în secțiunea dezasblare/pregătire pentru utilizare în ordine inversă.

Descriere:Cadrul este realizat din profile ușoare de duraluminiu tratate la suprafață, împreună cu o placă de sprijin căptușită și mână ergonomică din plastic. Amvonul este deplasat de patru roți pivotante, dintre care două sunt echipate cu o frână de picior. Reglarea ușoară a înălțimii este posibilă datorită plăcii de sprijin reglabile.

Destin: Cadrul este destinat persoanelor cu dizabilități și persoanelor cu mobilitate redusă. Susține și ameliorează membrele inferioare în timpul mersului, antrenamentului de mers, stărilor posttraumatice și postoperatorii și reabilitării ulterioare.

Date tehnice:

Latimea totala a bazei: 71 cm.
 Adancime totala a bazei: 86 cm
 Inaltime totala (de la manere pana la sol): 117-145 cm
 Dimensiuni suport: Latime: 62 cm, Adancime: 49 cm, Inaltime: 7 cm Greutate:
 9,8 kg
 Sarcina maxima: 136 kg



ACEST MARC INDICĂ GREUTATEA MAXIMĂ UTILIZATORULUI.

Întreținere: Cadrul poate fi curățat și întreținut cu agenți de curățare, dezinfectare și conservare obișnuiți, fără solvenți. Pentru a menține stabilitatea maximă, vă recomandăm să verificați în mod regulat poziția tuturor elementelor de fixare. Rotirea lină a roților trebuie verificată în mod regulat și impuritățile mecanice trebuie îndepărtate dacă este necesar.