


MANUAL DE UTILIZARE

Orteza de cot compresiva cu intarire silicon

AT53043

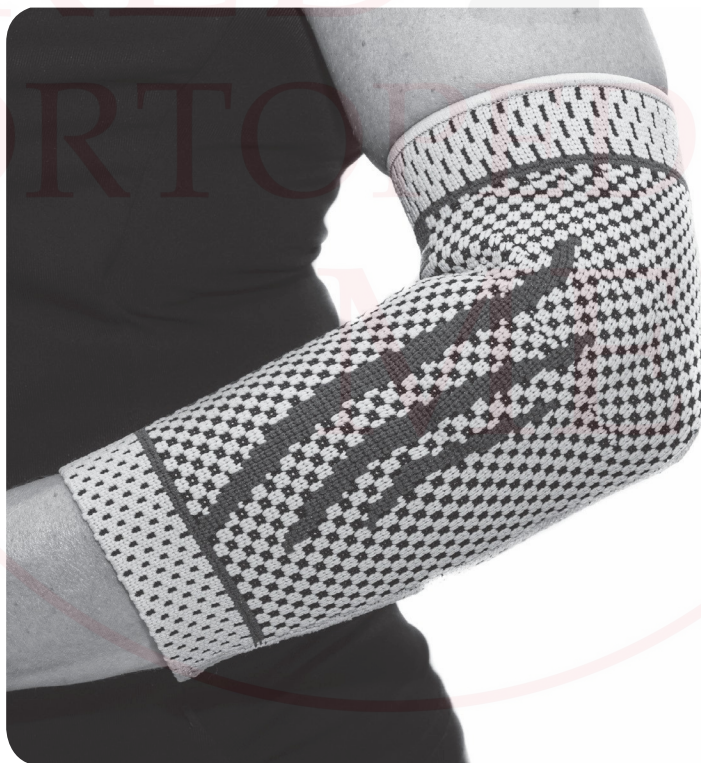

Informații generale

Orteza de cot este confecționată dintr-o țesătură de înaltă calitate care combină avantajele nailonului, poliesterului și latexului, asigurând durabilitate, flexibilitate și confort excelente, precum și o potrivire adecvată. Oferă un sprijin puternic și eficient pentru mușchii și articulațiile slăbite și previne rănilile. Produsul este conceput pentru a oferi suport maxim, menținând în același timp o potrivire confortabilă. Produsul este potrivit atât pentru uzul zilnic, cât și pentru uz sportiv. Este important să obțineți dimensiunea corectă pentru a asigura beneficii maxime și pentru a evita supracompresia. Dacă aparatul dentar este utilizat după o rănire, solicitați sfatul medicului dacă nu există nicio îmbunătățire în decurs de 72 de ore. Dacă vătămarea este gravă sau dacă aveți orice îndoială, solicitați imediat sfatul medicului. Este necesară supravegherea unui adult atunci când este utilizat de copii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.

ATENȚIE:

În cazul unui „incident grav” legat de produs, care a dus direct sau indirect la, poate fi dus la sau poate duce la oricare dintre următoarele: a) decesul unui pacient, utilizator sau alte persoane sau

b) deteriorarea temporară sau permanentă a sănătății pacientului, utilizatorului sau altei persoane sau (c) o amenințare gravă la adresa sănătății publice acest „incident grav” ar trebui raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care locuiește utilizatorul sau pacientul. În cazul Poloniei, autoritatea competentă este Oficiul pentru înregistrarea produselor medicamentose, a dispozitivelor medicale și a produselor biocide.

ATENȚIE:

În caz de durere, reacții alergice sau alte simptome tulburătoare, neclare pentru utilizator legate de utilizarea dispozitivului medical, consultați un medic.

Indicații:

- tendinita cotului (cot de tenis)
- slăbiciune a cotului
- o măsură preventivă care calmează și protejează împotriva rănilor și supraîncărcărilor

Contraindicații:

- dacă apare durere sau erupție cutanată, întrerupeți imediat utilizarea și solicitați sfatul medicului

Funcții:

- orteza asigură funcționarea articulației în gama optimă, anatomică, de mișcare
- armăturile din silicon asigură o compresie ușoară în zonele expuse la răni
- ușurință extraordinară, material care asigură „respirația” sub orteză
- tiv confortabil

Instrucțiuni de curățare a produsului:

- Aparatul poate fi spălat numai manual în apă caldă (până la 40°C) cu un detergent slab (de exemplu săpun gri).
- Nu călcați.
- Nu curățați chimic.
- Nu folosiți înălbitor.
- Protejați împotriva umezelii.
- Nu expuneți la temperaturi ridicate.
- Nu uscați în mașină.
- Uscați plat, strângeți ușor înainte de uscare.

Depozitare:


Depozitați într-o cameră uscată.

Metoda de eliminare a produsului după scoaterea din funcțiune

După ce dispozitivul este scos din funcțiune, dispozitivul medical poate fi aruncat ca deșeuri municipale obișnuite

Interval de livrare:bretele

Orteza se pune trăgând-o peste braț.

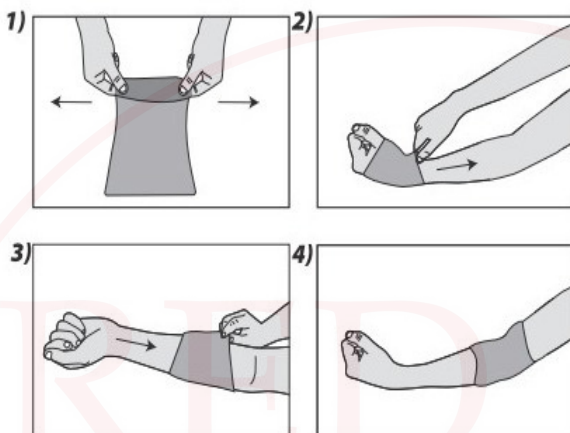

Pentru a alege mărimea potrivită, se recomandă măsurarea circumferinței brațului la 10 cm deasupra și sub cot, inclusiv la înțemână (fig. 5).

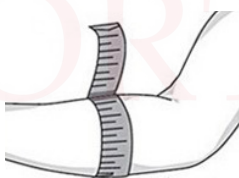


Fig. 5

Dimensiuni disponibile: M (20-24cm), L (24-27cm), XL (27-30cm), XXL (30-33cm)

Compoziție: 60% nailon, 30% latex, 10% spandex

Avertizări: nu utilizați produsul dacă s-au folosit lichide sau unguente încălzitoare, nu utilizați în caz de deteriorare a pielii.

Comentarii:

- Înainte de a pune orteza, citiți acest manual.
- Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că bretelele nu prezintă nicio abraziune pe cusături.
- Utilizarea produsului contrar regulilor cuprinse în manual poate duce la complicații grave.
- Utilizați aparatul de orteză conform instrucțiunilor medicului dumneavoastră sau kinetoterapeutului.
- Produsul nu trebuie utilizat în cazul rănilor deschise, abraziunilor epidermei, precum și după aplicarea prealabilă a unui gel sau unguent de încălzire.
- Purtarea ortezei pe timp de noapte este posibilă numai dacă este recomandată de medicul curant.
- Momentul de purtare a ortezei trebuie consultat cu un medic.