



## MANUAL DE UTILIZARE

### AT53042 GLEZNERĂ



### **Informații generale**

Orteza de gleznă este realizată din țesătură de înaltă calitate care combină avantajele nailonului, poliesterului și latexului, asigurând durabilitate, flexibilitate și confort excelente, precum și o potrivire adecvată. Oferă un sprijin puternic și eficient pentru mușchii și articulațiile slăbite și previne rănilile. Produsul este conceput pentru a oferi suport maxim, menținând în același timp o potrivire confortabilă. Produsul este potrivit atât pentru uzul zilnic, cât și pentru uz sportiv. Este important să obțineți dimensiunea corectă pentru a asigura beneficii maxime și pentru a evita supracompresia. Dacă aparatul dentar este utilizat după o rănire, solicitați sfatul medicului dacă nu există nicio îmbunătățire în decurs de 72 de ore. Dacă vătămarea este gravă sau dacă aveți orice îndoială, solicitați imediat sfatul medicului. Este necesară supravegherea unui adult atunci când este utilizat de copii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.

### **ATENȚIE:**

În cazul unui „incident grav” legat de produs, care a dus direct sau indirect la, poate fi dus la sau poate duce la oricare dintre următoarele: a) decesul unui pacient, utilizator sau alte persoane sau

b) deteriorarea temporară sau permanentă a sănătății pacientului, utilizatorului sau altei persoane sau

(c) o amenințare gravă la adresa sănătății publice

acest „incident grav” ar trebui raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care locuiește utilizatorul sau pacientul. În cazul Poloniei, autoritatea competentă este Oficiul pentru înregistrarea produselor medicamentoase, a dispozitivelor medicale și a produselor biocide.

### **ATENȚIE:**

În caz de durere, reacții alergice sau alte simptome tulburătoare, neclare pentru utilizator legate de utilizarea dispozitivului medical, consultați un medic.

### **Indicatii:**

- leziuni la gleznă,
- boli ale articulației gleznei,
- reabilitare după diferite boli ale articulației gleznei,
- o măsură de protecție în caz de slăbiciune a articulației gleznei,
- modificări post-traumatice,
- în timpul reabilitării după proceduri chirurgicale.

### **Contraindicii:**

- dacă apare durere sau erupție cutanată, întrerupeți imediat utilizarea și solicitați sfatul medicului

### **Funcții:**

- orteza asigură funcționarea articulației în gama optimă, anatomică, de mișcare

### **Depozitare:**

Depozitați într-o cameră uscată.

### **Metoda de eliminare a produsului după scoaterea din funcțiune**


După ce dispozitivul este scos din funcțiune, dispozitivul medical poate fi aruncat ca deșeuri municipale obișnuite

### **Interval de livrare:**bretele

### **Instrucțiuni de curățare a produsului:**

- Aparatul poate fi spălat numai manual în apă caldută (până la 40°C) cu un detergent slab (de exemplu săpun gri).
- Nu călcați.
- Nu curățați chimic.
- Nu folosiți înălbitor.
- Protejați împotriva umezelii.
- Nu expuneți la temperaturi ridicate.
- Nu uscați în mașină.
- Uscați plat, strângeți ușor înainte de uscare.

Orteza se pune trăgând-o pe picior.

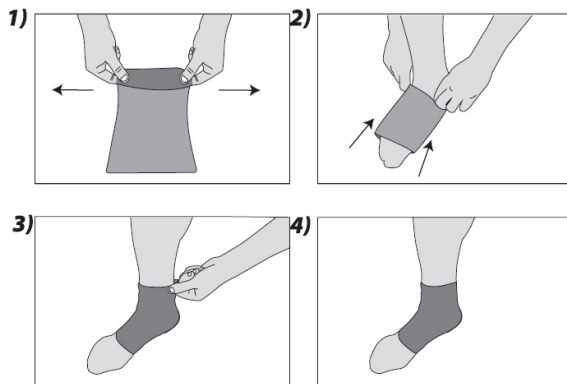

Pentru a alege mărimea potrivită, măsurați circumferința gleznei la o înălțime de 10 cm (fig. 5)



Fig. 5

**Dimensiuni disponibile:**M (18-21cm), L (21-23cm), XL (23-26cm), XXL (26-29cm)

**Compoziție:**60% nailon, 30% latex și 10% spandex

**Avertizări:**nu utilizați produsul dacă s-au folosit lichide sau unguente încălzitoare, nu utilizați în caz de deteriorare a pielii.

**Comentarii:**

- Înainte de a pune orteza, citiți acest manual.
- Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că bretelea nu prezintă nicio abraziune pe cusături.
- Utilizarea produsului contrar regulilor cuprinse în manual poate duce la complicații grave.
- Utilizați aparatul de orteză conform instrucțiunilor medicului dumneavoastră sau kinetoterapeutului.
- Produsul nu trebuie utilizat în cazul rănilor deschise, abraziunilor epidermei, precum și după aplicarea anterioară a unui gel sau unguent de încălzire.
- Purtarea ortezei pe timp de noapte este posibilă numai dacă este recomandată de medicul curant.
- Momentul de purtare a ortezei trebuie consultat cu un medic.

## CARD DE GARANTIE

Model: .....

Număr de serie: .....

Ștampila punctului de vânzare

și semnatura lizibilă a Vanzatorului: .....

- 1) ANTAR Sp. J., 03-068 Varșovia, ul. Zawiślańska 43, acordă prin prezenta o garanție de 12 luni pentru produs, începând de la data achiziționării produsului de către Cumpărător. Pentru produsele a căror achiziție este rambursată de către Fondul Național de Sănătate, perioada de garanție se prelungește și acoperă jumătate din perioada de utilizare specificată în Regulamentul privind prestațiile garantate, cu condiția ca perioada de utilizare să fie specificată în Regulament în luni sau ani.
- 2) În perioada de garanție, ANTAR se obligă să efectueze reparațiile necesare restabilirii bunei funcționări a produsului în termen de 14 zile de la data primirii produsului de către service împreună cu dovada achiziției și cardul de garanție.
- 3) ANTAR își rezervă dreptul de a înlocui produsul în cazul în care constată ca costurile de reparație nu sunt profitabile. Repararea sau înlocuirea produselor defecte nu prelungește perioada de garanție. 4) Dacă se constată ca produsul nu funcționează corespunzător, acesta trebuie trimis imediat la adresa ANTAR (data la pct. 1) sau contactați punctul de vânzare.
- 5) Înainte de utilizare, citiți cu atenție manualul și respectați prevederile acestuia. Utilizarea produsului contrar utilizării și recomandărilor sale are ca rezultat pierderea irevocabilă a garanției.
- 6) Garanția nu acoperă daunele cauzate de forța mecanică exterioară, sarcinile care depășesc greutatea maximă admisă a utilizatorului, așa cum este descrisă în manual, precum și contactul produsului cu alcool, substanțe grase sau benzină. Garanția nu acoperă piesele supuse uzurii normale în timpul utilizării, cum ar fi rulmenții, elementele din cauciuc și altele. 7) Produsul depus la serviciu în legătură cu reclamația nu poate provoca o epidemie.
- 8) ACEASTA GARANȚIE ESTE VALABILĂ NUMAI CU DOVADA CUMPĂRĂRII (factură, chitanță, factură). ÎN CAZUL O PLÂNGERE, TREBUIE ATASATĂ DOVADA CUMPĂRĂRII. PENTRU A RECUNOAȘTE PERIOADA DE GARANȚIE PRELUNGITĂ PENTRU PRODUSE CARE FOST RASTURSATE DE FONDUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE, VĂ RUGĂM SĂ ANEXAȚI O COPIE A COMANDĂ PENTRU DISPOZITIVE ȘI AJUTOR MEDICALE ORTOPEDICE.
- 9) Reclamațiile depuse fără dovada achiziției și cardul de garanție cu numărul de serie al produsului nu vor fi luate în considerare.



ANTAR Sp. J  
03-068 Varșovia, ul. Zawislanska 43  
Polonia  
Tel. 22 518 36 00, fax 22 518 36 30  
www.antar.net e-mail: antar@antar.net

